


## BEWEGUNGSMÖGLICHKEITEN




**FLEXION-  
DISTRAKTION**



**SEITENBEUGUNG**

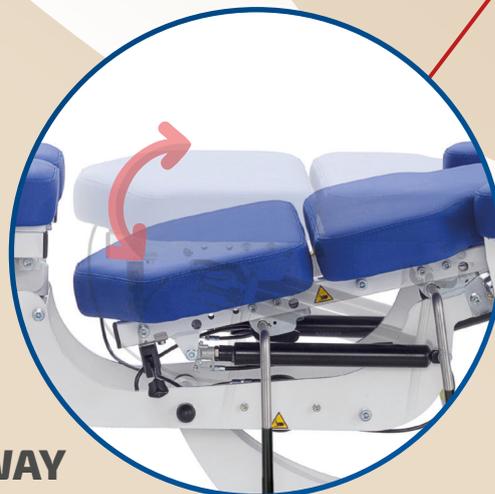

**BREAKAWAY**

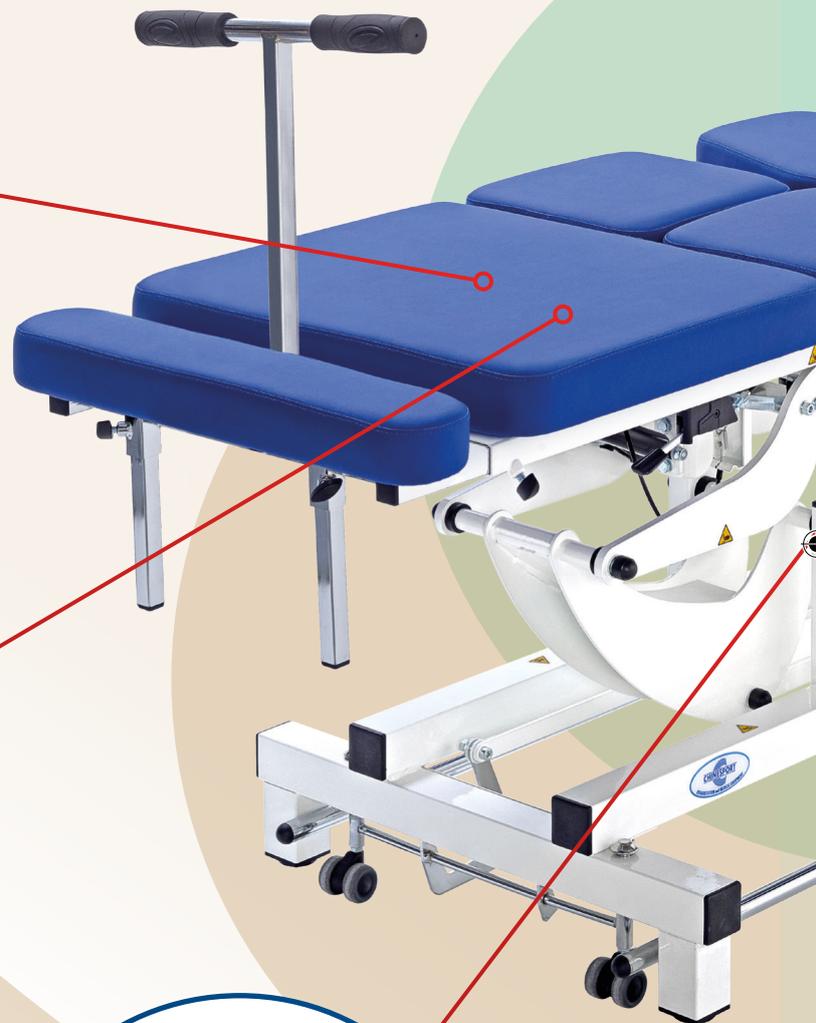



## DROPS



ZERVIKAL



BRUST



LENDE



BECKEN



## DROP-TABLE TECHNIK

Die DROP-Technik ermöglicht es Therapeuten, die Hals-, Brust-, Lenden- und Beckensegmente anzuheben und sie dann durch Druck schnell abzusenken.

Mit der zervical Drop-Funktion kann der Therapeut den Bereich zwischen Hinterkopf und erstem Wirbel mit den verlaufenden Nervenstrukturen manipulieren, wo verschiedene Probleme (z. B. Migräne) ihren Ursprung haben. Diese Technik ist effektiv und nicht-invasiv. Der Patient kann dadurch leichter manipuliert werden.

Die chiropraktische Technik bietet mehrere Vorteile:

1. ermöglicht eine sanftere Manipulation;
2. reduziert den Kraftaufwand des Therapeuten;
3. macht die Manipulation weniger invasiv, da die Kraft nicht von den Gelenken absorbiert, sondern durch das Abfallen des Segments verteilt wird.

Insbesondere ermöglicht sie dem Therapeuten die Behandlung von schwierigen Patienten, wie z. B. steifen, gebrechlichen oder Angst vor manueller Behandlung habenden Patienten.



1. CERVICAL DROP



2. THORACIC DROP



3. LUMBAR DROP



4. PELVIC DROP



## FLEXION-DISTRACTION TECHNIQUE



Die Flexions-Distraktions-Bewegung ermöglicht es dem Therapeuten, die Beine des Patienten durch eine pumpende Bewegung zu behandeln. Diese wirkt sich auf die Lendenwirbelsäule zwischen Becken-/Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule sowie auf die oberen Segmente aus.

Der Schwerpunkt der Flexions-Distraktions-Bewegung liegt auf der Behandlung von Erkrankungen der Lendenwirbelsäule, insbesondere Hernien und lumbalen Stenose

### SEITENBEUGUNG

Eine zusätzliche Seitwärtsbeugebewegung ermöglicht es dem Therapeuten, Patienten in der Akutphase zu behandeln und ihnen eine für sie bequeme Position zu ermöglichen.



## BREAKAWAY BEWEGUNG

Das Breakaway-System konzentriert sich auf die Mobilisierung des Brustbereichs. Durch diese Funktion bearbeitet der Therapeut den Brustbereich mit einer pumpenden Abwärtsbewegung und übt Druck auf die Wirbelsäule aus.

Therapeuten können sich dynamisch mit den Patienten bewegen oder in einer brückenartigen Position positioniert werden, um Manipulationen durchführen zu können

## HÖHENVERSTELLBARER RAHMEN

Die Liege ist elektrisch höhenverstellbar von 56 bis 93 cm mittels Rundumstangenschaltung.

Die Liege lässt sich auf 54 cm absenken – eine ideale Höhe für die Wirbelsäulenmanipulation, bei der die Liege bis unter die Kniescheiben des Therapeuten reichen muss.

Der lackierte Metallrahmen ist robust, stabil und geräuscharm. Alle Drehpunkte gleiten auf selbstschmierenden Buchsen.

Die zulässige Tragfähigkeit beträgt 200 kg.



## GEPOLSTERTE TEILE

Die Breite von nur 56 cm ermöglicht es manuell Therapeuten, sich über dem Körper des Patienten auszustrecken, was bei einer größeren Liege physisch nicht möglich wäre.

Für die chiropraktische Droptechnik stehen verschiedene Polsterteile in zervikaler, thorakaler, lumbaler und Beckenhöhe zur Verfügung.

Die zugehörigen Polsterteile sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

Das Beinteil ist verstellbar, um die Flexions-Distraktions-Technik sowie die Seitwärtsbewegung durch den Therapeuten zu ermöglichen.



## KOPFTEIL



Another interesting aspect is long nose / mouth breathing hole, so patients rest their head on the head section which is adjustable in height.

They can adopt a relaxed position and move freely, therefore therapists find it easier to manipulate their neck.

The head section is with nose-mouth breathing hole is a standard feature, and some options are also available.

## HÖHENVERSTELLBARE ARMLEHNEN



Diese Funktion ermöglicht es Patienten, ihre Arme auf den Armlehnen abzulegen und eine optimale Position mit entspannten Schultern einzunehmen.

Diese Position ist ideal für die Behandlung, da der Therapeut die Liege präzise an den Körperbau des Patienten anpassen kann.

## FUSSABLAGAGE



Die Fußablage ist in Tiefe und Höhe verstellbar. So kann die Gesamtlänge der Liege durch die Tiefenverstellung des gepolsterten Fußteils verändert werden.

Der Drop Swing-Tisch ist außerdem mit einem höhenverstellbaren Doppelgriff ausgestattet, der für die Flexions-Distraktions-Technik und die Seitbeuge unerlässlich ist.

# Ther Drop Line für die Drop Technik

## Ther Drop Liege


Es handelt sich um eine mehrteilige manuelle Therapieliege für chiropraktische Manipulationsbehandlungen. Sie ermöglicht insbesondere chiropraktische Drop-Table-Bewegungen für Hals-, Brust-, Lenden- und Beckenbehandlungen.

L	M	2	1	1					1	X	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	



### TECHNISCHE DATEN

Chiropraktische Drop-Table Bewegung	verfügbar
Flexions-Distraktionsbewegung	-
Seitbeugebewegung	-
Breakaway Bewegung	-
Netzanschluss:	230 V 50/60 Hz (Schuko-Stecker)
IP Schutzklasse	54
Rahmenhöhenverstellung	Elektrisch, Rundum-Bedienstange
Höhenverstellung (min ÷ max)	52 ÷ 96 cm
Polsterbreite	56 cm
Polsterdicke-und dichte	40 mm – 30 kg/m <sup>3</sup>
Kopfteilverstellung	+30° ÷ -25°, Gasdruckfeder
Rollen	40 mm Durchmesser (zentral gebremst)
Sichere Arbeitslast	200 kg
Gewicht	90 kg

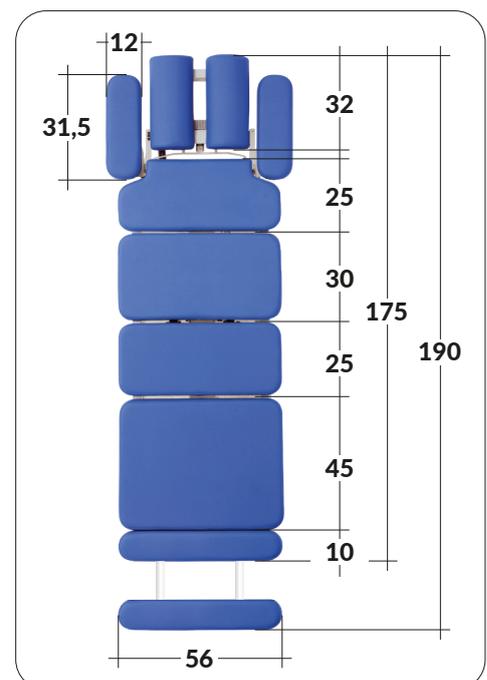



## KONFIGURATIONSOPTIONEN

### Pos. 6 - KOPFTEIL



**A** Kopfteil Drop




**B** Multifunktions Kopfteil Drop




**C** Kopfteil Ohne Drop


### Pos. 7 - RUMPFTEIL

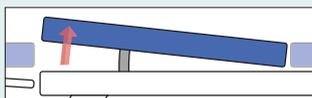


**4** Osteo Brust Drop

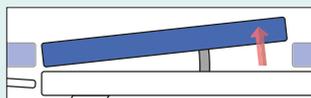

**5** Osteo Lenden Drop

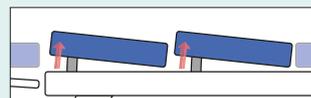


**6** Osteo Lenden Brust Drop

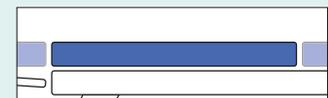


**8** Osteo Lenden Brust Fix

### Pos. 8 - BECKENTEIL

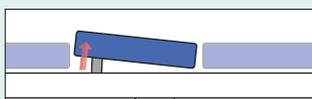

**1** Standard Becken Drop

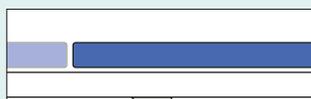

**3** Beckenteil Fix

### Pos. 11 - POSTERUNG FARBE

Bitte geben Sie die gewünschte Polsterfarbe unter den verfügbaren Optionen an. Die Basisfarbe ist die Farbe 3 - Marineblau. Für andere Farboptionen wird ein Aufpreis berechnet.

A N 8 7 S 4 T 1 6 E Z G F H 9 Q R 2 **3** M P

# Ther Drop Line für die Flexion-Distraktions Technik

## Ther Drop Swing Liege

Diese Liege bietet im Vergleich zum Ther Drop Liege Artikelnummer LM211 mehr Funktionalität. Ein weiterer Vorteil dieses Modells ist die Flexions-Distraktions-Technik. Seitliche Beugebewegungen sind ebenfalls möglich. Ein Breakaway System ermöglicht eine bequemere Rückenlage des Patienten.

L	M	1	1	1					1	X	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	



### TECHNISCHE DATEN

Chiropraktische Drop-Table Bewegung	verfügbar
Flexions-Distraktionsbewegung	verfügbar
Seitbeugebewegung	verfügbar
Breakaway Bewegung	verfügbar
Netzanschluss:	230 V 50/60 Hz (Schuko-Stecker)
IP Schutzklasse	54
Rahmenhöhenverstellung	Elektrisch, Rundum-Bedienstange
Höhenverstellung (min ÷ max)	56 ÷ 93 cm
Polsterbreite	56 cm
Polsterdicke-und dichte	40 mm – 30 kg/m <sup>3</sup>
Kopfteilverstellung	+30° ÷ -25°, Gasdruckfeder
Rollen	40 mm Durchmesser (zentral gebremst)
Sichere Arbeitslast	200 kg
Gewicht	90 kg



## KONFIGURATIONSOPTIONEN

### Pos. 6 - KOPFTEIL



**A** Kopfteil Drop




**B** Multifunktions Kopfteil Drop




**C** Kopfteil Ohne Drop

### Pos. 7 - RUMPFTEIL

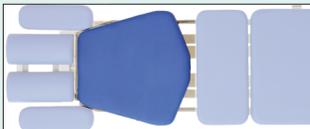

**1** Brust Drop

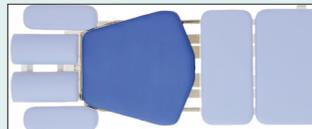

**2** Lenden Drop



**3** Lenden Brust Drop



**4** Osteo Brust Drop



**5** Osteo Lenden Drop



**6** Osteo Lenden Brust Drop



**7** Lenden Brust Segment Fix



**8** Osteo Lenden Brust Segment Fix

### Pos. 8 - BECKENTEIL



**1** Standard Becken Drop



**2** Becken Drop Vier



**3** Beckenteil Fix

### Pos. 11 - POSTERUNG FARBE

Bitte geben Sie die gewünschte Polsterfarbe unter den verfügbaren Optionen an. Die Basisfarbe ist die Farbe 3 - Marineblau. Für andere Farboptionen wird ein Aufpreis berechnet.

- A 
  N 
  8 
  7 
  S 
  4 
  T 
  1 
  6 
  E 
  Z 
  G 
  F 
  H 
  9 
  Q 
  R 
  2 
  3 
  M 
  P